

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff



sentida

Łóżka uniwersalne





Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w doskonałym otoczeniu

sentida – uniwersalna i oszczędna

Upadki są jednym z największych zagrożeń dla zdrowia fizycznego i samopoczucia osób starszych, dlatego skuteczne zapobieganie nim odgrywa decydującą rolę w opiece nad seniorami i jest ważną cechą jakościową placówek opiekuńczych. Zdrowotne konsekwencje upadku są często poważne, szczególnie dla osób starszych, a czasami nawet nieodwracalne. Lęk przed upadkami jest jedną z najczęstszych konsekwencji psychologicznych, które mogą prowadzić do zmniejszenia aktywności fizycznej, utraty pewności siebie i izolacji społecznej.

Dzięki łóżkom z rodziny sentida firmie wissner-bosserhoff udaje się konsekwentnie spełnić wymagania dotyczące współczesnej opieki: maksymalne bezpieczeństwo w połączeniu z domowym designem. Innowacyjne rozwiązania takie jak unikalna strategia poziomowania 3-stopniowego oraz opatentowana koncepcja barierek bocznych SafeFree® zmniejszają ryzyko upadku oraz ustanawiają standardy w zakresie bezpieczeństwa, mobilności, regulacji wysokości i komfortu.

5

Milionów
upadków osób
starszych rocznie:

Prawie jedna trzecia 65-latków oraz połowa 80-latków doświadcza upadku co najmniej raz w roku. W samych Niemczech każdego roku odnotowuje się około 5 milionów upadków osób starszych.

(Źródło: Gesundheit und Krankheit im Alter. Wydawca Karin Böhm, Statistisches Bundesamt/ Clemens Tesch-Römer, Deutsches Zentrum für Altersfragen/ Thomas Ziese, Robert Koch-Institut. Berlin 2009)



Zapobieganie przy
pomocy łóżek
sentida


używanych w obiektach o wysokich wymaganiach dotyczących opieki uniwersalnej i pielęgnacyjnej: domy seniora, domy opieki, oazy opieki, oddziały opieki paliatywnej, oddziały demencji i geriatрії oraz ośrodki rehabilitacyjne.



Aranżacja **Upierzenie ptaka**

sentida | Design 010 | Dekor Ciemna Akacja

Natura została tutaj wykorzystana jako model doboru materiałów i kolorów. Harmonijnie skoordynowana jak upierzenie ptaka – tworzy komfortowo umeblowane pomieszczenie, które zapewnia mieszkańcom bezpieczeństwo i ochronę. Podczas siedzenia przy oknie można rano usłyszeć świergot ptaków. Ta aranżacja jest tylko sugestią, chętnie doradzimy indywidualne rozwiązania.

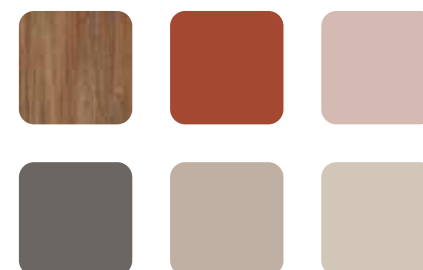

sentida Portfolio

Model podstawowy



Model mobilny



Model elastyczny



Model domowy



Model extra-mobilny



Model	sentida 1	sentida 3	sentida 4	sentida 5	sentida 6
Zdolność jazdy	W obniżonej pozycji łóżka	W dowolnej pozycji łóżka	W dowolnej pozycji łóżka	W dowolnej pozycji łóżka	W dowolnej pozycji łóżka
Kółka	Dwa kółka 100 mm od strony zagłowia	Od strony nóg cztery 50 lub 75 mm rolki Od zagłowia dwa 100 lub 160 mm kółka stałe	50 lub 75 mm podwójne rolki	50 mm podwójne kółka całkowicie zakryte	Kółka 100, 125 lub 150 mm, lub kółka podwójne 125 mm, lub kółka designerskie
Hamowanie	Hamulec elektryczny z przełącznikiem ręcznym	Hamulec elektryczny, przełącznik ręczny, dźwignia hamulca po stronie nóg	Hamulec po stronie nóg oraz zagłowia	Hamulec z 2-rolkową blokadą centralną	Wspornik hamulca po stronie zanózka
Bezpieczne obciążenie	225 kg	225 kg	225 kg	270 kg	270 kg
Regulacja wysokości	25-80 cm	25-80 cm	25-80 cm	27-80 cm	27-80 cm z 100 mm kółka easy-roll 29,5-82,5 cm z 125 mm kółka easy-roll 28-81 cm z 125 mm kółka designerskie lub podwójne 32-85 cm z 150 mm kółka easy-roll
Powierzchnia leżenia	87/100 x 200/210/220 cm	87/100 x 200/210/220 cm	87/100 x 200/210/220 cm	87/100 x 200/210/220 cm	87/100 x 200/210/220 cm (sentida 6 & 6-d*) 79 cm x 200 cm (sentida 6-s) 79 cm x 190 cm (sentida 6-xs)

Na stronie 23 również wersja łatwo demontowalna

270 kg

270 kg





Przegląd zalet

Ochrona i mobilność

SafeFree® – opatentowana koncepcja ochrony bocznej

| 12 - 13

NOWOŚĆ: Osłony boczne – indywidualnie w razie potrzeby | SafeFree® Flex

| 14 - 15

Opiekuj się, uaktywnij i śpij bezpiecznie system 3-STOP

| 16

Elastyczność i oszczędność czasu

Beznarzędziowa regulacja długości łóżek

| 17

Skuteczność zapobiegania odleżynom

Ergonomia i modułowość powierzchni leżącej

| 18 - 19

NOWOŚĆ: Popraw i utrzymuj mobilność

SafeLift | Rewolucyjna obsługa łóżka dla pacjenta

| 20

Intuicyjna obsługa

Przejrzysty i ergonomiczny

| 21

Bezpieczeństwo w dzień i w nocy

SafeSense® – inteligentny system czujników wyjścia z łóżka

| 22

Łatwo demontowalny

sentida 6-d

| 23

Efektywność energetyczna i odporność

dzięki innowacyjnej koncepcji napędu

| 26

Lampka do czytania

soluna + lymera

| 27

NOWOŚĆ: Zestaw mobilizacyjny

MobiStick 2

| 28

Myślimy przyszłościowo

memoriana | aranżacja pokoju dla osób z demencją

| 29

Więcej możliwości

Projekt | Kolory i dekoracje | Sprzęt i akcesoria


| 30



Aranżacja Miasto

sentida | Design HD-3 | Dekor Wiśnia Havana

Coraz więcej osób decyduje się na rezygnację z emerytury w cichym domku na wsi i zamiast tego wybiera spędzanie czasu w mieście w otoczeniu życia i kultury. Przejście na emeryturę w mieście nie polega na relaksie w spokoju po latach ciężkiej pracy, ale na czerpaniu jak najwięcej z nowo odnalezionej wolności, doświadczaniu nowych rzeczy, nawiązywaniu nowych przyjaźni i ponownym odkrywaniu siebie w sercu ciągle zmieniającego się miejskiego krajobrazu.

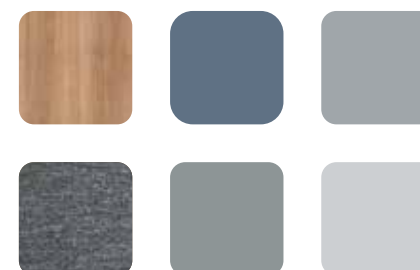

Ochrona i mobilność bez FDM*

SafeFree® opatentowana koncepcja ochrony bocznej

Podział systemu bezpieczeństwa SafeFree® jest opatentowany, certyfikowany, a technologia wypróbowana i przetestowana ponad milion razy. Można go wygodnie i szybko obniżyć. Zajmuje niewiele miejsca oraz w zależności od sytuacji i wielkości pacjenta można go indywidualnie ustawić na 4 poziomach wysokości.

1

Nie wymaga ochrony



Po opuszczeniu podzielone osłony boczne zapewniają przytulny wygląd i bezproblemowy dostęp do pacjenta w celu codziennej opieki. Akcesoria takie jak środkowe słupki lub stałe części boczne nie muszą być wyjmowane i przechowywane.

2

Delikatna ochrona



Dla bezpieczeństwa w nocy często wystarczy połączyć niską pozycję łóżka z pierwszym wysuwanym poziomem urządzenia zabezpieczającego. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych barier i zmniejsza ryzyko upadku.

3

3/4 ochrony



Umożliwia to celową przerwę w dolnej części podnóża, aby zmniejszyć odczucie skrępowania wolności (FDM) przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

4

Pełna ochrona (FDM*)
dla materacy do 18 cm wysokości



Najwyższa górna pozycja służy do wszechstronnej ochrony pacjenta. Obydwie części osłon bocznych są szczelnie zamknięte, będąc bezpieczne tak samo jak ciągłe barierki boczne, jednocześnie przewyższając je normą IEC 60601-2-52



W przypadku wyższych materacy można dodatkowo zwiększyć wysokość barierki o dodatkowe 6 cm.


Dowiedz się więcej:



Wideo do zobaczenia po zeskanowaniu




Większe bezpieczeństwo,
wąska środkowa szczelina**
< 60 mm

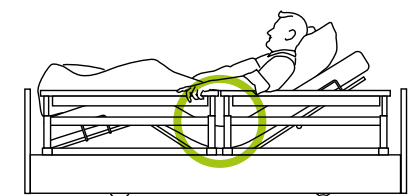

- Zgodność z normą IEC 60601-2-52
- Bezpieczeństwo pozycji roboczej, tzn. również z podniesionym oparciem lub podnóżkiem
- Bezpieczeństwo bez użycia dodatkowego zabezpieczenia środkowej szczeliny jako akcesoria przy mocowaniu za pomocą pasów brzusznych zgodnie z zaleceniami BfArM***


Łatwość opieki

4 podziały bezpieczeństwa = elastyczny dostęp

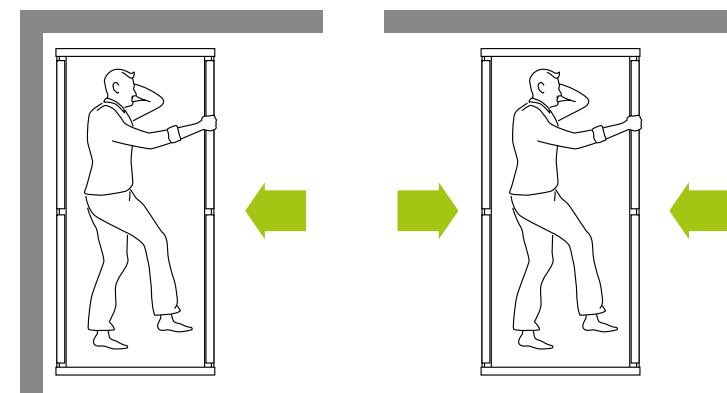

- Elastyczne użytkowanie łóżka w różnych wnękach dla osób wstających z lewej lub prawej strony dla zwiększenia mobilności
- Dostęp z obu stron, gdy istnieje zwiększona potrzeba opieki
- Możliwość dostosowania za pomocą SafeFree® Flex

Mobilność i bezpieczeństwo
niezależnie od wielkości ciała

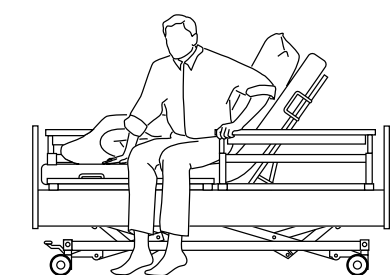

Dzielona osłona boczna może być używana bardzo efektywnie, ponieważ jest łatwa do uchwycenia i objęcia. Służy zatem jako bezpieczna pomoc przy wstawaniu i wyraźnie wspiera mobilność osoby starszej.

2 Pozycje automatyczne



Oglądaj telewizję, czytaj lub jedz w łóżku dzięki automatycznemu komfortowemu fotelewi



Zapobieganie odleżynom poprzez automatyczne pozycjonowanie

* Środki pozabawiające wolność | ** Śródkowa szczelina = odległość między podzielonymi osłonami bocznymi
*** Informacje przekazane przez BfArM (Niemiecki Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych) dla specjalistów z dnia 8 lipca 2004 r. (Numer referencyjny 913/0704)

SafeFree® Flex

Oslony boczne tak indywidualne, jak Twoje potrzeby

Oprócz zamontowanych na stałe elementów bocznych, indywidualne i przyszłościowe rozwiązanie SafeFree® Flex zapewnia możliwie największą swobodę i niezbędną ochronę. Jednocześnie SafeFree® Flex zachowuje przytulny design, który wyróżnia wszystkie łóżka do domów opieki wissner-bosserhoff.

0
nie wymaga ochrony



Komfortowe łóżko bez bocznej ochrony

1|2
Delikatna ochrona (bez FDM*)



Pomoc tylko od strony głowy

3
3/4 ochrony (bez FDM*)



Ochrona ściany z wyjściem od strony podnóżka

4
Pełna ochrona (FDM*)
dla materacy do 18 cm wysokości



4 w pełni regulowane osłony boczne

Bezpieczeństwo

Pełna ochrona



Bezpieczne mocowanie elementów

Zapobiega przypadkowemu poluzowaniu lub usunięciu elementów bocznych

Pełne bezpieczeństwo



Zamknięcie szczelinowe między panelem bocznym, a powierzchnią leżącą. Ochrona przed wypadkami spowodowanymi zaplątaniem się lub uwięzieniem.

Maksymalna mobilizacja



Optymalna długość i indywidualne regulowanie wysokości osłon bocznych. Doskonała ochrona bioder podczas snu, a także wygodna i ergonomiczna mobilizacja pacjenta.



Wolny

mniej FDM*



Celowe "pominięcie" osłon bocznych

Zabezpieczenie inwestycji dla operatora, zabezpieczenie prawne dotyczące FDM* dla personelu pielęgniarzkiego


Elastyczny

Więcej oszczędności

Beznarzędziowa regulacja elementów bocznych.

Budżet jest elastyczny tak samo jak mocowanie elementów bocznych, ponieważ płacisz tylko za te elementy, których naprawę potrzebują Twoi pacjenci.

Szybka adaptacja do zmieniających się warunków mieszkaniowych - z zamknięciem szczelinowym (1) i z poręczą (2) lub w pełni i trwale regulowanymi osłonami bocznymi (3)

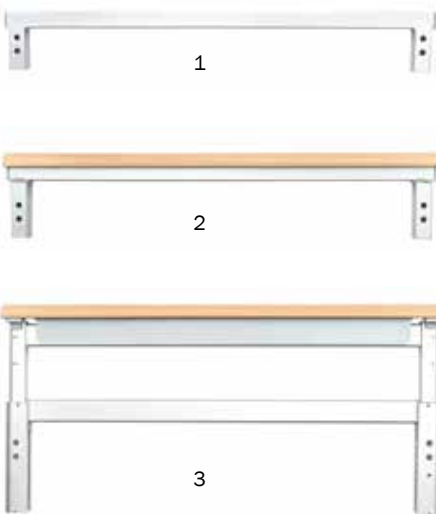

Dowiedz się więcej:



Wideo




Bezpieczna opieka, mobilizacja i sen

system 3-STOP

- Wygodny zakres regulacji 27-80 cm
- Pierwszy stoper do wstawania z łóżka na wysokości krzesła 41 cm
- Ochrona przed kolizją podczas regulacji wygodnej pozycji siedzącej z pozycji niskiej oraz podczas korzystania z przedłużenia łóżka

80 cm

Optymalna pozycja do opieki

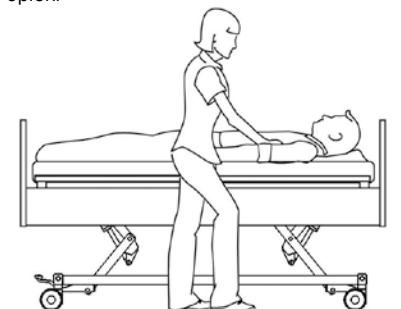


41 cm*

Bezpieczna mobilność na wysokości krzesła



27 cm*

Zapobieganie upadkom podczas fazy snu

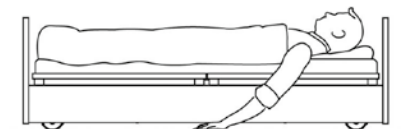


Elastyczność i oszczędność czasu

Beznarzędziowa regulacja długości łóżka

- Nasze łóżka pielęgnacyjne są standardowo wyposażone w zintegrowany system przedłużenia łóżka
- Elastyczny i beznarzędziowy system wydłużenia łóżka
- Normy IEC 60601-2-52 są spełnione w każdej konfiguracji.


200 cm

Długość łóżka 200cm: podzielone osłony boczne zapewniają ochronę bez dużej środkowej szczeliny* i bez ochraniacza.

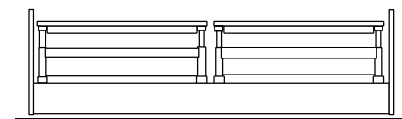


210 cm

Alternatywna długość łóżka 210cm: ochraniacz z dłuższymi osłonami bocznymi po stronie podnóżka bez akcesoriów i szczeliny >318**

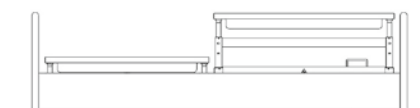

220 cm


Przedłużenie łóżka do 220cm: Dla zapewnienia maksymalnej ochrony niezbędne jest dodatkowe wyposażenie w postaci przedłużenia barierek.

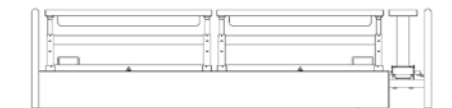

Skuteczne zapobieganie odleżynom


Ergonomia i modułowość powierzchni leżącej

Ergonomiczny podział powierzchni leżącej pomaga uniknąć obciążeń uciskowych, a tym samym zmniejszyć odleżyny. Wymiary 4-sekcyjnej powierzchni łóżka z kolekcji łóżek pielęgnacyjnych wissner-bosserhoff są dostosowane do średniej wysokości osoby. W oparciu o przeprowadzone testy.

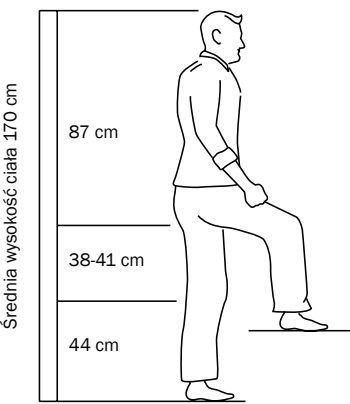

Antropometria według Prof. Eigler*

Prof. Eigler wskazuje, że obszar oparcia powinien mieć co najmniej 80 cm długości, aby zapewnić skuteczne podparcie kręgosłupa szyjnego. Dzięki zintegrowanej powierzchni osiągnięto dodatkowe zmniejszenie obciążeń powierzchni do leżenia BiNetic dla pacjentów większych niż przeciętni.

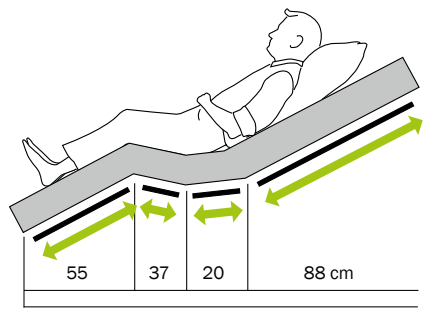


BiNetic powierzchnia leżąca 200 cm (długość oparcia)

Przedłużenie łóżka: Dzięki beznarzędziowemu przedłużeniu łóżka powierzchnia leżąca może zostać przedłużona tymczasowo lub na stałe do 220cm za pomocą specjalnej wkładki przedłużającej, zapobiegając w ten sposób uderzaniu nóg o podnóżek


Modułowa podstawa materaca

- Do wyboru masz 3 różne powierzchnie leża:
- 01 Siatkowa powierzchnia leża Areo zapewnia dobrą wentylację
 - 02 Plastikowe podkładki na podstawie materaca EasyClean są szczególnie łatwe do czyszczenia
 - 03 Wygodna powierzchnia do leżenia z 55 elementami sprężystymi nie tylko poprawia komfort leżenia, ale także stanowi cenny wkład w zapobieganiu odleżynom.

Ogólnie rzecz biorąc, każdy typ leża jest szybko demontowalny oraz łatwy do czyszczenia.

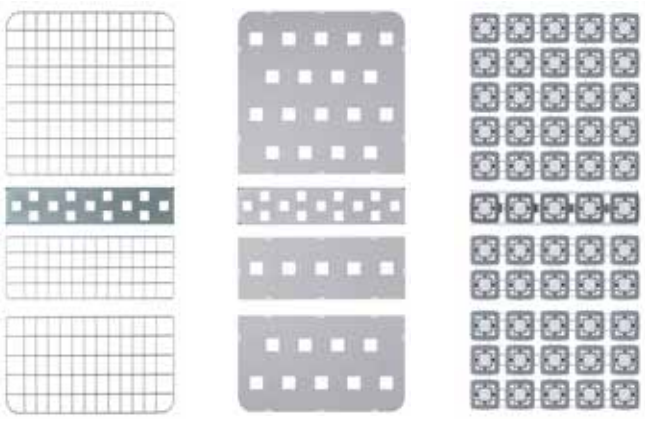

01 02 03

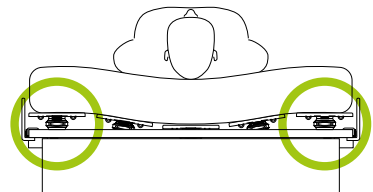

Wygodna powierzchnia do leżenia z 55 elementami sprężynowymi.



Szczególnie komfortowe

Aż

2.7

milionów ludzi

w Niemczech cierpi na chroniczne rany, takie jak odleżyny. Ryzyko powstania odleżyny wynosi ponad 11% dla osób powyżej 90 roku życia. Odleżyny stanowią poważne obciążenie dla pacjenta. Terapia zwykle trwa kilka tygodni lub miesięcy i często może powodować dodatkowy dyskomfort.


Źródło: BVMed 2012 study

Efekt podwójnego rozszerzenia leża**


BiNetic charakteryzuje się podwójnym cofnięciem leża. Przesuwane jest nie tylko oparcie, ale także podnóżek z dala od części siedziska, dzięki czemu zwiększa się powierzchnia siedziska. Wyniki pomiarów nacisku wyraźnie pokazują, że obciążenie ciśnieniowe na podwójnie cofniętym leżu jest niższe niż przy pojedynczym cofnięciu i

znacznie mniejsze niż przy standardowej powierzchni do leżenia. Podwójne cofnięcie leża nie powinno służyć jednak jako tylko jedno zabezpieczenie zapobiegające odleżynom.

Powierzchnia do leżenia Wi-Bo

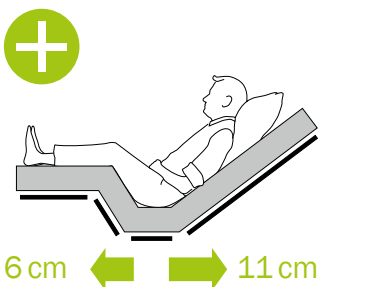


Podwójne cofnięcie = zapobieganie odleżynom

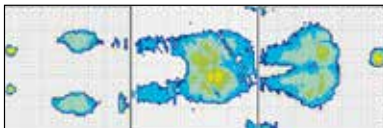


Termografia powierzchni leżącej BiNetic

Standardowa powierzchnia leżąca

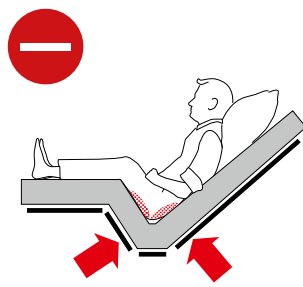

Zwykłe cofnięcie = ryzyko odleżyn

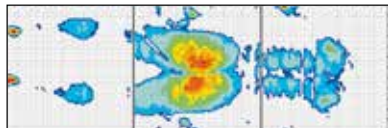


Termografia standardowej powierzchni do leżenia

↓

Podwójne rozszerzenie =

17cm

więcej miejsca w łóżku

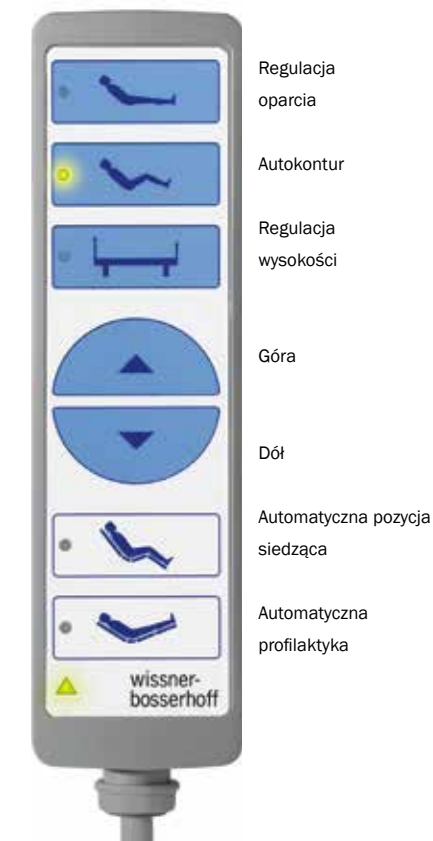

Popraw i utrzymaj mobilność

SafeLift | Rewolucyjna obsługa łóżka dla mieszkańców

NOWE!

SafeLift oferuje najprostszą możliwą obsługę, dzięki czemu pacjent może samodzielnie regulować swoje łóżko i ustawić je w optymalnej dla siebie pozycji. Jednocześnie może się podeprzeć na kontrolerze SafeLift w pozycji stojącej.

- Kontroler bez kabli i baterii
- Przyciski regulacji wysokości łóżka i oparcia
- Duże przyciski
- Łatwo dostępna pozycja na jednej z osłon bocznych SafeFree® Flex
- Przycisk GO (ochrona przed niezamierzaną regulacją łóżka)
- Obrotowość 360°
- Ergonomiczna konstrukcja
- Wysoka stabilność



Dowiedz się więcej:



Instrukcja obsługi

Przejrzysty i bardziej ergonomiczny

Obsługa ręczna łóżek pielęgnacyjnych sentida robi wrażenie dzięki przejrzystemu rozmieszczeniu i ergonomicznej konstrukcji: mniej przycisków i duże symbole zapewniają intuicyjną obsługę. Dzięki funkcji preselekcji (Funkcja preselekcji) przełącznik ręczny jest odporny na błędy – niemożliwe jest uruchomienie funkcji przez przypadkowe naciśnięcie przycisku.

Zaawansowane funkcje

- Lampka nocna i lampka do czytania
- Oddzielna regulacja podnóżka
- Funkcja mobilizacji



www.wi-bo.com/de/Ueber-uns/Anleitungsvideos

Klucz niemagnetyczny dla trzech poziomów bezpieczeństwa



3 poziomy bezpieczeństwa



Tryb otwarty

Tryb blokady

Tryb rezydenta

Funkcja blokowania z tyłu jest zintegrowana z pilotem, więc nie ma potrzeby szukania i pochylania się w celu zablokowania skrzyni przymocowanej do łóżka. Trzy tryby przełączenia ręcznego ustawia się za pomocą przycisku:

Tryb otwarty:

Wszystkie przyciski wyboru są zwolnione.

Tryb blokady:

Wszystkie funkcje przełącznika ręcznego są zablokowane.

Tryb rezydenta:

Niebieskie przyciski wyboru są dostępne dla pacjenta.

Bezpieczeństwo w dzień i w nocny

SafeSense® – inteligentny system czujników wyjścia z łóżka

wissner-bosserhoff prezentuje SafeSense® system wspomagający z inteligentną technologią czujników, które niezawodnie wspierają redukcję FDM* w dzień i w nocy. Czujnik wyposażony jest w automatyczną lampkę nocną, która włącza się, gdy pacjent wstanie z łóżka i gasnie, gdy pacjent wraca do łóżka. SafeSense® jest kompatybilny z dostępnymi na rynku systemami przywoływania pielęgniarek oraz może być używany do wszystkich naszych łóżek od 2002 roku.



Automatyczne światło nocne Indywidualny alarm

- Lampka nocna włącza się automatycznie po wstaniu z łóżka
- Lampka nocna gaśnie, gdy pacjent wraca do łóżka
- Elastyczny i płynnie regulowany alarm uruchamiany natychmiastowo po wstaniu z łóżka lub do 30min od wstania z łóżka
- Dostosowuje się do mobilności pacjenta

Zintegrowany lub dostępny jako zestaw modernizacyjny*

- Opcja akcesoriów do obecnych łóżek w domach opieki WIBO
- Dostępne z kablem lub bezprzewodowo

Dowiedz się więcej:



Większe
bezpieczeństwo –
mniej FDM*

- Krótszy czas reakcji w przypadku upadku
- Wyższy poziom bezpieczeństwa na nocnych i weekendowych zmianach
- Mniej wizyt inspekcyjnych
- Idealny w połączeniu z niskimi łóżkami sentida i ochroną boczną SafeFree®

Łatwo demontowalny

sentida 6-d

Na pierwszy rzut oka sentida 6-d jest nie do odróżnienia od łóżka sentida 6. Parametry techniczne tych dwóch łóżek są również identyczne. Różnica staje się widoczna tylko wtedy, gdy przyjrzyj się bliżej modelowi sentida 6-d. Zobaczysz, że jest prawie beznarzędziowa i może być całkowicie zdemontowana i oczywiście, w krótkim czasie ponownie złożona przez tylko jedną osobę. Żadna pojedyncza część nie waży więcej niż 18kg, więc wszystkie wymagania bezpieczeństwa pracy i higieny są spełnione.

sentida 6-d jest stosowana w placówkach oraz domach z wąskimi drzwiami – bez konieczności rezygnacji z wyglądu łóżka, jakości i stabilności.





sentida 6-d demontowalny
żadna część nie waży więcej niż 18kg



Aranżacja Liliowa

sentida | Design G10

Ponadczasowy i klasyczny wybór materiałów i kolorów nadaje pomieszczeniu wyjątkowej atmosfery. Modny liliowy kolor przypomina wiosnę - wszystko kwitnie, świeże kolory zastępują zimową szarość. Ta aranżacja jest tylko sugestią, chętnie doradzimy Tobie indywidualnie.

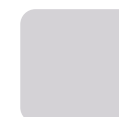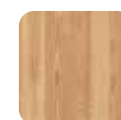

Efektywność energetyczna i odporność

Dzięki innowacyjnej koncepcji napędu

Mocny silnik sprawia, że łóżka sentida są jeszcze bardziej przyjazne dla użytkownika, sprężyste i energooszczędne. Zintegrowana technologia LED, energooszczędny sprzęt i przyjazna w obsłudze konstrukcja stanowi ekonomiczne wymagania eksploatacji domu opieki.



Bardziej przyjazny dla użytkownika

Łóżka sentida zawierają zintegrowane z silnikiem połączenie oświetlenia łóżka w technologii LED. Wszystko czego potrzebujesz to podłączony kabel zasilania od łóżka do gniazda z prądem.



www.wi-bo.com/de/Ueber-uns/Anleitungsvideos

Odporny i bezpieczny

Silnik jest szczególnie wydajny, przy dużych obciążeniach może optymalnie prezentować swoje zalety. Zapewnia bezpieczne obciążenie robocze do 270 kg (Sentida 5 i 6) i toleruje maksymalną masę pacjenta do 235/255 kg (w zależności od dobranych akcesoriów).



Ekonomiczny i energooszczędny

Ze względu na stale rosnące ceny energii elektrycznej, efektywność energetyczna staje się coraz ważniejszym czynnikiem. Przy wyjątkowo niskim zużyciu energii w trybie czuwania wynoszącym zaledwie 0,5 W silnik jest wyjątkowo ekonomiczny.

Poniżej przedstawimy przykładową kalkulację pokazującą wpływ, jakie zużycie energii w trybie czuwania łóżek pielęgnacyjnych może mieć na koszty:



Produkt	Zużycie w trybie gotowości	Koszty w ciągu 15lat*
Nowa sentida	0.5 W	€1,950
Łóżko A	3.76 W	€15,345
Łóżko B	2.5 W	€10,200
Łóżko C	1.7 W	€6,900

* Przykład: placówka wykorzystująca 100 łóżek

Lampa do czytania

soluna + lymera

Specjalnym elementem stylistycznym lamp soluna jest elegancki abażur o częściowo półprzezroczystym charakterze. Światło wyposażone w obrotowe ramię umożliwia precyzyjne ustawienie punktu świetlnego w pobliżu obiektu i harmonijnie wpasowuje się w ergonomię łóżek pielęgnacyjnych. Dzięki zmiennej pozycjonowanej głowicy lampy, w tym indywidualnie regulowanemu kierunkowi światła, soluna nadaje się również dobrze jako lampa do czytania i lampa łóżkowa.



Komfortowa lampka do czytania LED lymera

Zalety LED

- Długa żywotność
- Niskie zużycie energii
- Brak wytwarzania ciepła
- Absolutnie bezpieczna obsługa



Designerska lampa LED soluna z falującym kloszem



Zestaw mobilizacyjny

MobiStick 2

MobiStick 2 wspomaga mieszkańców podczas mobilizacji, mieszkaniac w wielu przypadkach nie musi prosić personelu pielęgniarstwa o pomoc podczas podnoszenia się z łóżka. Ergonomiczny kształt MobiStick 2 sprawia, że jest łatwy i intuicyjny w użyciu w dowolnym miejscu.



Dzięki ergonomicznemu kształtowi MobiStick2 jest łatwy i intuicyjny w użyciu oraz ma uniwersalne zastosowanie. Pokrętko ręczne jest obrotowe i ma prostą blokadę.



Gdy nie jest używany, można go po prostu złożyć, dzięki czemu nie przeszkadza, ale jest szybko gotowy do użycia w razie potrzeby.

NOWE!



Beznarzędziowy

MobiStick 2 można przymocować bez użycia narzędzi po obu stronach łóżka, jest odpowiedni dla każdego mieszkańca i można go doposażyć w łóżka wissner-bosserhoff produkowane od 2004 roku.

Dowiedz się więcej:



Myślimy przyszłościowo

memoriana | Aranżacja mieszkalna dla osób z demencją

Odpowiednia opieka nad pacjentami z demencją jest szczególnym wyzwaniem dla pielęgniarek i krewnych. We współpracy z ekspertami od demencji w Wielkiej Brytanii i Niemczech firma wissner-bosserhoff opracowała koncepcję przestrzenną dla osób z demencją. Nowa koncepcja zapewnia znaczną ulgę w opiece, szczególnie dostosowanej do potrzeb osób chorych. Rozwój koncentruje się na trzech celach opieki dla pacjentów z demencją:



Popraw orientację

Pacjenci mają do dyspozycji punkty orientacji czasowej, kolorystycznej i przestrzennej. Ukierunkowana integracja kolorów, kształtów i obiektów pomaga w postrzeganiu przestrzennym - redukuje to lęki i frustracje.



Zwiększ niezależność

Im bardziej niezależny pacjent może swobodnie poruszać się w swoim otoczeniu, tym większą swobodę daje to personelowi pielęgniarstwu. Funkcjonalne elementy wyposażenia, takie jak poręcze i otwarte schowki, sprzyjają mobilności opiekunów.



Maksymalne bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo mieszkańców jest kluczowym aspektem. Łóżko nisko ustawione z barierkami bocznymi, poręcze na ścianach. Kontrastowe kontury mebli oraz piktogramy wewnątrz szaf zapewniają osobom cierpiącym na demencję maksymalny komfort bez zauważalnych ograniczeń.



Kolory | dekory*



Biały wulkaniczny (U11502)



Brzoza Lund (R35018)



Dąb Lindber (R20021)



Sosna Suomi Szara (R55022)



Buk naturalny (R24015)



Buk (R24034)



Wiśnia (R42002)



Wiśnia Havana (R42006)



Sosna wiejska (R55023)



Akacja ciemna (R38006)



Kombinacje kolorów dla aranżacja pokoju memoriana (strona 29)

Certyfikat bezpieczeństwa

wissner-bosserhoff dobrowolnie kontroluje procesy produkcyjne i zarządzanie przy wykorzystaniu TÜV Süd. Wi-Bo jest certyfikowana zgodnie z przepisami ISO 9001 dla systemów zarządzania jakością, DIN EN ISO 13485 dla produkcji wyrobów medycznych i ISO 14001 dla zarządzania.



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016



ISO 14001:2015



Certyfikat CB na bezpieczeństwo produktu TÜV Süd



Gwarancja osłony boczne na



Pokrowce ze skóry ekologicznej i tkanin

Dzięki naszemu nowemu rozwiązaniu oferujemy doskonały materiał powierzchniowy o następujących właściwościach:

- Odporny na wilgoć i brud
- Oddychający
- Wodoodporny
- Odporny na krew i mocz

- Odporny na środki dezynfekujące
- Niezwykle wytrzymały
- Przyjazny dla środowiska i wolny od zanieczyszczeń
- Trwały
- Trudnopalny (zgodny z kryteriami zapalenia z DIN EN 1021 części 1 + 2 i BS 5852 Crib 5*)

Nowe możliwości kombinacji
Skonsultuj się z nami!



Skaj



Srebrnoszary



Perła



Brzozowy



Kamryk



Kaszmir



Smoke



Wiśnia



Kukurydza



Limonka



Royal

Tkaniny




Zielony, kwiat (Aurora 6520)



Niebieski, paski (Agon 5520)



Szary, paski (Agon 8520)

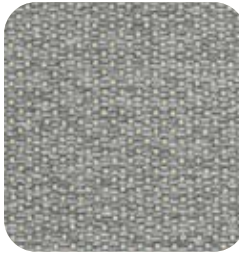

Szary, kropki (Flint 8520)



Łąka (Mailo 6520)



Morze (Mailo 5520)



Piasek (Mailo 1521)



Kamień (Mailo 8520)



Róża (Mailo 4520)

Design | zagłówek-/zanózek

zagłówek



Design A
zanózek/zagłówek



Design D



Design Df



Design G



Design K



Design O



Design T



Design Ts

zanózek



Design Ak
zagłówek/zanózek



Design D



Design Df



Design G



Design K



Design O



Design T



Design Ts

sekcja niska



Design Ak
złożony



Design Dx



Design Dfx



Design Gx



Design Kx



Design Ox




Design Tx




Design Tsx

Akcesoria | SafeSense® & SafeLift

SafeSense® mata czujnika 2.1

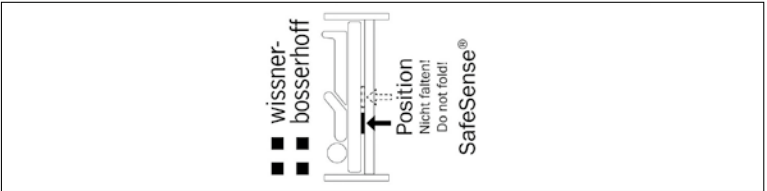

02-000876
SafeSense® mata
czujnika 2.1 80 x 20 cm

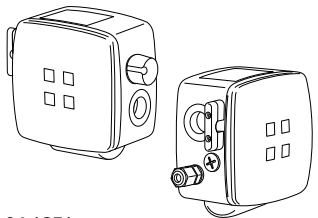


04-1851
Cyfrowa skrzynia
wyjściowa na łóżko z
kablem lub radiem

Dostępny
również w
zestawie:

Mata z czujnikiem
2.1 & Bed-Exit-Box 2
10-0871
Wersja kablowa
10-0872
Wersja radiowa

SafeSense® zestaw połączeniowy

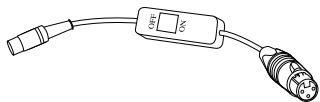

04-1508
Kabel adaptera z włącznikiem i odpowiednią
wtyczką do podłączenia do systemu
wywoławczego (specyficznego dla klienta) dla
rozwiązania kablowego i radiowego.




04-1608
Kabel adaptera bez włącznika/wyłącznika;
z odpowiednią wtyczką do podłączenia do
systemu połączeń (specyficzne dla klienta)
dla rozwiązania kablowego i radiowego

SafeLift - obsługa łóżka



10-0811
SafeLift kontroler

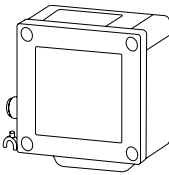


10-0808
SafeLiftBox


Jako zestaw:

10-0799
SafeLift set

Płytki mocujące SafeSense® i SafeLift

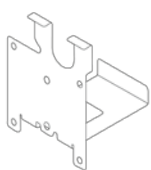


01-011193
Wspornik do silnika DU09

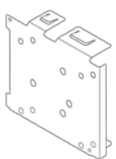


01-011194
Wspornik do silnika Q7

Sprzęt i akcesoria

Wymiary

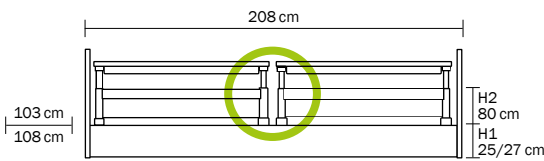


sentida z podzielonymi osłonami bocznymi (zestaw 10), pełne wymiary zewnętrzne: L = 208 cm, B = 103/108 cm
wymiary materaca L = 200 cm, B = 87 cm
H1 25/27 cm (niska pozycja), H2 80 cm (wysoka pozycja)

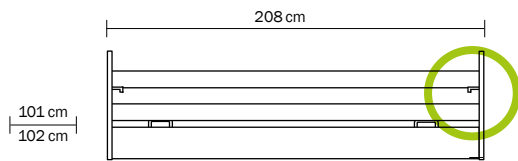


sentida z ciągłą 2-stronną osłoną boczną


Powierzchnia leżąca

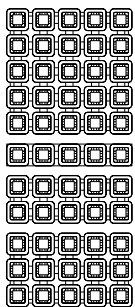

Comfort

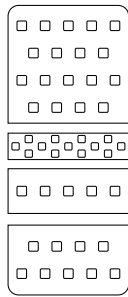


EasyClean

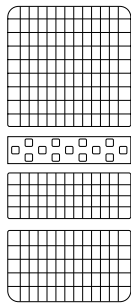


Standard | Aero


Przedłużenie łóżek

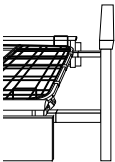


Tymczasowe przedłużenie łóżka, 10 szyn bocznych(Standard)

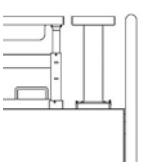


Stałe przedłużenie łóżka, 10-stronna ochrona boczna(Opcja)

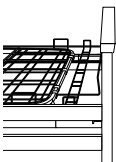

Stałe przedłużenie łóżka 09 zabezpieczenie boczne(Opcja)

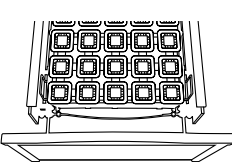


Przedłużenie łóżka z wyraźnym zwolnieniem (Opcja)

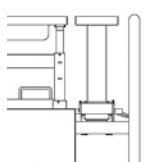

10-0570 / 10-0580
Ochraniacz na przedłużenie łóżka o 20 cm (Opcja)


Opcje

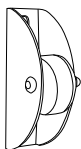


Pionowe rolki ochronne do ścian



Rolki ochronne do ścian 3D z efektem poziomym i pionowym

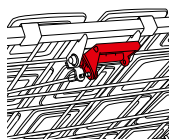


Manualne opuszczanie awaryjne na oparciu leża

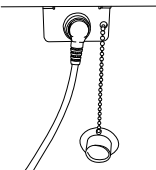


Plug + Play, aby użyć sterowania ręcznego po jednej lub obu stronach łóżka

01-010812, 01-010813
Przełączalna lampka podłogowa (nie pokazano).


Wyposażenie

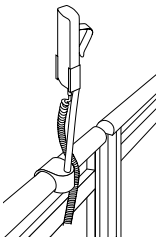


10-0419
Uchwyt przełącznika ręcznego dla osłon bocznych
10-0421
Uchwyt przełącznika ręcznego – krótki

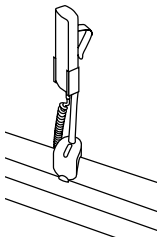


10-0422
Uchwyt na akcesoria i przełącznik ręczny do przymocowania do bocznych części łóżka
10-0421
Uchwyt na worek na mocz

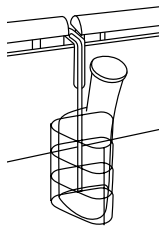


10-0424
Uchwyt na akcesoria i przełącznik ręczny do przymocowania do boku łóżka
50-0164
Uchwyt na worek na mocz (nie pokazano)

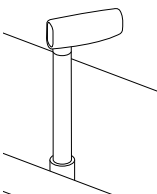


10-0634
Pomoc mobilizacyjna MobiStick 2

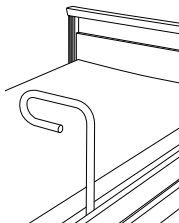

10-0715
Pomoc przy wstawianiu i 3/4-osłony boczne

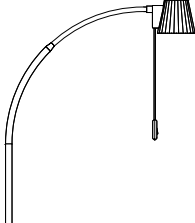


50-0773 Wzorcowe światło LED soluna z zasilaczem
50-0550 Wzorcowe światło LED

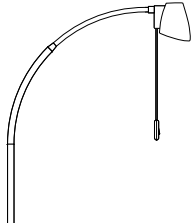


50-0677 Komfortowa lampka do czytania LED Lymera (z zasilaniem i bez). Przezroczysty klosz.




50-0206
Mata przeciwupadkowa sze. 90 x dł. 200 cm, wys. ok. 4,5 cm

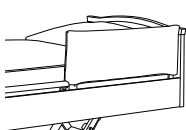


50-0174
Podkładka pod zabezpieczenia boczne

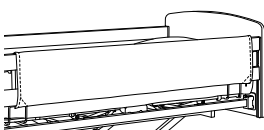


50-0338
Osłona boczna ciągła tapicerowana

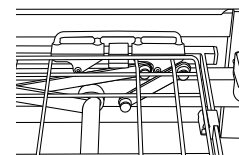


10-0563/10-0533/10-0521
Uchwyt Segufix
- na podparcie ud
- na oparciu
- do siedziska

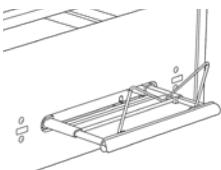


10-0617
Zintegrowany konstrukcyjnie blat na pościel kompatybilny ze wszystkimi łóżkami (z wyjątkiem osłon bocznych 09-er3 i A-kk)

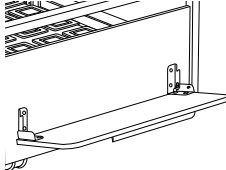

10-0719
Półka na pościel

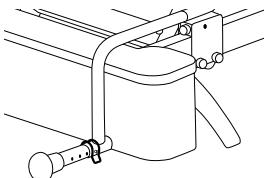

Dystans teleskopowy tylko dla sentida 5 & 6
10-0801 krótki, 1 x 20 mm
10-0802 średni, 4 x 20 mm
10-0803 długi, 8 x 20 mm

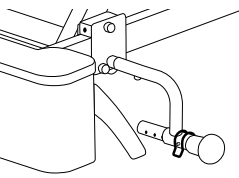

Dystans teleskopowy tylko dla sentida 5 & 6
10-0804 krótki, 1 x 20 mm
10-0805 średni, 4 x 20 mm
10-0806 długi, 8 x 20 mm

Members of LINET Group



wissner-bosserhoff | Germany | wi-bo.com

Wyłączny dystrybutor w Polsce
Destini Group Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Obornicka 52 | 62-002 Złotniki | Polska
Tel.: +48 790 665 445
biuro@destinicare.pl | destinicare.pl
NIP 9721258845

**DESTINI
CARE** 