

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

movita

Łóżka pielęgnacyjne



DESTINI
CARE



movita łóżka pielęgnacyjne

Ekonomiczny w opiece, wygodny dla pacjenta

Rynek opieki pielęgniarstwiej podlega wielu wpływom i trendom, takim jak rosnący odsetek osób wymagających najbardziej intensywnej opieki i osób z demencją. Stanowi to coraz większe wyzwanie jakościowe i ekonomiczne dla operatorów i personelu pielęgniarstwiej w domach opieki. Jest to tym bardziej prawdziwe w kontekście coraz mniejszej podaży wykwalifikowanego personelu pielęgniarstwiej. Popularne są koncepcje i produkty, które ułatwiają pielęgnację i przekonują pod względem ekonomicznym. Łóżka pielęgnacyjne movita łączą w sobie elementy funkcjonalne z oszczędnością i wygodą

Czynniki wpływające na rynek opieki i trendy*

Rynek	Czynniki	Trend
	Demografia	Zmiany w strukturze demograficznej populacji, wzrost średniej długości życia, rosnące ryzyko (demencja), wycofanie wsparcia rodziny.
	Sektor publiczny	Zmiana wytycznych politycznych, ograniczenie przewidywalności polityki, wycofanie publicznego sektora promocji nieruchomości itp.
	Klient	Zmiana zachowań w zakresie popytu.

Zdjęcie: René Schwerdtel, modele: Paul Chaillet (*1916) & Nicole Marques| zdjęcie na okładce (portret): Jim Rakete, model: Anneliese Kutsche (*1926)


*Źródło: CBRE/ITC: "Pflegeimmobilienreport 2012–2013" (nursing institutions report 2012–2013)



Aranżacja “Ocean”

movita | Design T10

Połączenie kolorów niczym dzień na plaży daje poczucie spokoju i harmonii. Intuicyjnie zamykamy oczy, słuchamy fal, rozkoszujemy się świeżym morskim powietrzem i wakacyjnym dobrym samopoczuciem. W takim pomieszczeniu poczujesz się swobodnie. Ta aranżacja jest tylko sugestią – z chęcią udzielimy indywidualnej porady.

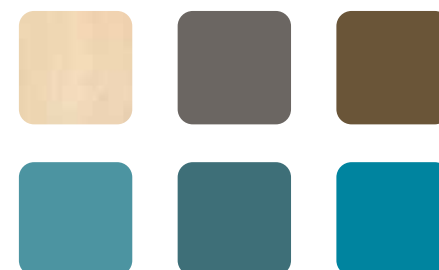

Portfolio movita

Model mobilny



movita

Ruchomy niezależnie od wysokości łóżka

100 mm kółka gładko jeżdżące lub
125 mm kółka specjalnie
zaprojektowane

Indywidualny lub centralny układ hamulcowy
kółek z jedną rolką kierunkową, obsługiwany
za pomocą dźwigni nożnych po obu stronach

około 36/38 - 78/80 cm

Model domowy



movita casa

Ruchomy niezależnie od wysokości łóżka

50 mm podwójne kółka

Blokada obustronna przy użyciu dźwigni
nożnej

około 37 - 80 cm

Model wąski



movita 2-s

Ruchomy niezależnie od wysokości łóżka

100 mm podwójne kółka
100 mm gładko jeżdżące kółka
lub 125 mm kółka specjalnie
zaprojektowane

Pojedyńcze lub centralne blokowanie kółek
za pomocą dźwigni nożnej

około 36/38 - 78/80 cm

Specjalna funkcja
Szerokość powierzchni do leżenia: 80 cm

Model demontowalny



movita 2-d

Ruchomy niezależnie od wysokości łóżka

100 mm podwójne kółka
100 mm gładko jeżdżące kółka
lub 125 mm specjalnie zaprojektowane
kółka

Pojedyńcze blokowanie kół

około 36/38 - 78/80 cm

Specjalna funkcja
Możliwość szybkiego demontażu



Na pierwszy rzut oka movita 2-d nie różni się od standardowego łóżka movita. Parametry techniczne obu łóżek są również identyczne. Różnicę widać dopiero po bliższym przyjrzeniu się – movita 2-d może zostać całkowicie zdemontowana i ponownie złożona przez jedną osobę – szybko i bez użycia narzędzi. Żaden z poszczególnych elementów nie waży więcej niż 18 kg, zgodnie ze wszystkimi wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy.



Przegląd zalet

Ochrona i mobilność bez FDM*

SafeFree® – opatentowana koncepcja ochrony bocznej

| 10 - 11

NOWE: Osłony boczne - indywidualne według wymagań | SafeFree® Flex

| 12 - 13

Skuteczna profilaktyka odleżyn

Podwójne cofnięcie leża | 3 leżące obszary do wyboru

| 14 - 15

NOWE: Poprawa i utrzymanie mobilności

SafeLift | Rewolucyjna obsługa łóżek dla mieszkańców

| 16

Intuicyjna obsługa

Przejrzysty i ergonomiczny

| 17

NOWE: Manualna pomoc podczas mobilizacji

MobiStick 2

| 18

Bezpieczeństwo w dzień i w nocy

SafeSense® – inteligentny system czujników wyjścia z łóżka

| 19

Elastyczność i oszczędność czasu

Beznarzędziowa regulacja długości łóżka

| 20

Wydajność energetyczna i łatwość obsługi

Dzięki innowacyjnej koncepcji napędu

| 21

Więcej do wyboru

Projekt | Kolory i dekoracje | Sprzęt i akcesoria

| 22

Ochrona i mobilność bez FDM*

SafeFree® opatentowana koncepcja ochrony bocznej

Podział systemu bezpieczeństwa SafeFree® jest opatentowany, certyfikowany, a technologia wypróbowana i przetestowana ponad milion razy. Można go wygodnie i szybko obniżyć. Zajmuje niewiele miejsca oraz w zależności od sytuacji i wielkości pacjenta można go indywidualnie ustawić na 4 poziomach wysokości.

1

Nie wymaga ochrony



Po opuszczeniu podzielone osłony boczne zapewniają przytulny wygląd i bezproblemowy dostęp do pacjenta w celu codziennej opieki. Akcesoria takie jak środkowe słupki lub stałe części boczne nie muszą być wyjmowane i przechowywane.

2

Miękka ochrona



Dla bezpieczeństwa w nocy często wystarczy połączyć niską pozycję łóżka z pierwszym wysuwanym poziomem urządzenia zabezpieczającego. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych barier i zmniejsza ryzyko upadku.

3

3/4 ochrony



Umożliwia to celową przerwę w dolnej części zanóżka, aby zmniejszyć odczucie skrzepowania wolności (FDM) przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

4

Pełna ochrona (FDM*)

dla materacy do 18 cm



Najwyższa górna pozycja służy do wszechstronnej ochrony pacjenta. Obydwie części osłon bocznych są tak szczelnie zamknięte, że są tak bezpieczne jak ciągła ochrona boczna, a tym samym przewyższa ją normą IEC 60601-2-52. Przy mocowaniu za pomocą pasów brzusznych nie jest konieczne posiadanie na magazynie dodatkowych akcesoriów.




W przypadku wyższych materacy można dodatkowo zwiększyć wysokość barierki o dodatkowe 6 cm.

Dowiedz się więcej:




Większe bezpieczeństwo, wąska środkowa szczelina** < 60 mm

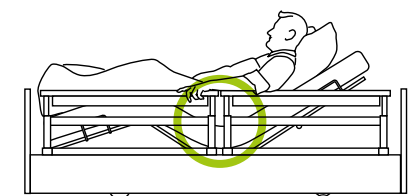



- Zgodność z normą IEC 60601-2-52
- Bezpieczeństwo pozycji roboczej, tzn. również z podniesionym oparciem lub zanóżkiem
- Bezpieczeństwo bez użycia dodatkowego zabezpieczenia środkowej szczeliny jako akcesoria przy mocowaniu za pomocą pasów brzusznych zgodnie z zaleceniami BfArM***

Łatwość opieki - elastyczny dostęp = 4 podziały bezpieczeństwa

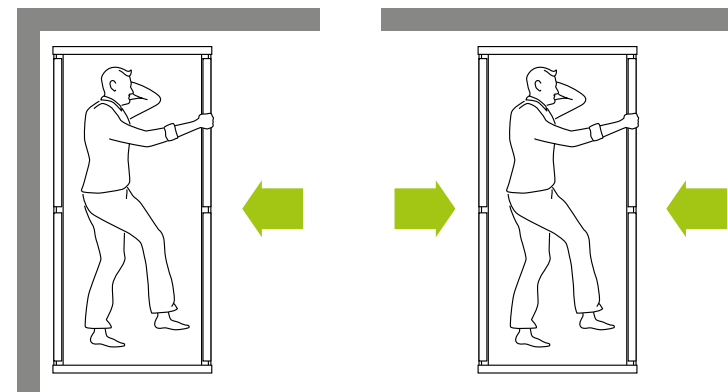

- Elastyczne użytkowanie łóżka w różnych wnękach dla osób wstających z lewej lub prawej strony dla zwiększenia mobilności
- Dostęp z obu stron, gdy istnieje zwiększona potrzeba opieki
- Możliwość dostosowania za pomocą SafeFree® Flex

Mobilność i bezpieczeństwo niezależnie od wielkości ciała

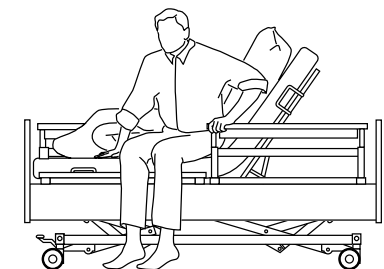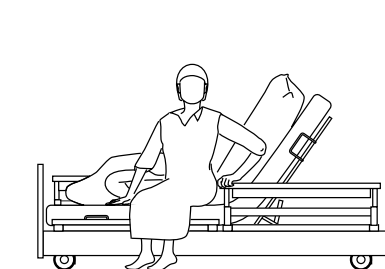

Dzielona osłona boczna może być używana bardzo efektywnie, ponieważ jest łatwa do uchwycenia i objęcia. Służy zatem jako bezpieczna pomoc przy wstawaniu i wyraźnie wspiera mobilność osoby starszej.

* Środki pozbawiające wolność | ** Średnia szczelina = odległość między podzielonymi osłonami bocznymi
*** Informacje podane przez BfArM (Niemiecki Federalny Instytut Leków i Wyrobów Medycznych) dla specjalistów, z dnia 8 lipca 2004 (numer referencyjny 913/0704)

SafeFree® Flex

Oslony boczne tak indywidualne, jak Twoje potrzeby

Oprócz zamontowanych na stałe elementów bocznych, indywidualne i przyszłościowe rozwiązanie SafeFree® Flex zapewnia możliwie największą swobodę i niezbędną ochronę. Jednocześnie SafeFree® Flex zachowuje przytulny design, który wyróżnia wszystkie łóżka do domów opieki wissner-bosserhoff.

0

Nie wymaga ochrony



Komfortowe łóżko bez ochrony bocznej

1|2

Miękka ochrona (bez FDM*)



Ochrona tylko od strony głowy

3

3/4 ochrony (bez FDM*)



Ochrona od strony ściany z wyjściem od strony zanózka

4

Pełna ochrona (FDM*)
dla materacy do 18 cm



4 w pełni regulowane osłony boczne

Bezpieczeństwo

Pełna ochrona



Bezpieczne mocowanie elementów

Zapobiega przypadkowemu poluzowaniu lub usunięciu elementów bocznych

Bezproblemowe bezpieczeństwo



Zamknięta szczelina pomiędzy panelem bocznym, a powierzchnią leżącą. Ochrona przeciw wypadkom spowodowanym zaklinowaniem.

Maksymalna mobilizacja



Optymalna długość i indywidualnie regulowana wysokość osłony bocznej wezgiowia. Doskonała ochrona bioder podczas snu a także wygodne i ergonomiczne narzędzie do mobilizacji mieszkańca.



Wolny

Mniej FDM*



Celowe "pominięcie" osłon bocznych

Zabezpieczenie inwestycji dla operatora, zabezpieczenie prawne dotyczące FDM* dla personelu pielęgniarzkiego

Flex

Więcej oszczędności


Beznarzędziowa regulacja elementów bocznych.

Budżet jest elastyczny tak samo jak mocowanie elementów bocznych, ponieważ płacisz tylko za te elementy, których naprawę potrzebują Twoi pacjenci.

Beznarzędziowe

Szybka adaptacja do zmieniających się warunków mieszkaniowych - z zamknięciem szczelinowym (1) i z poręczą (2) lub w pełni i trwale regulowanymi osłonami bocznymi (3)

Skorzystaj z przytulnego projektu z ciągłym panelem bocznym, niezależnie od wymaganej mobilizacji lub sytuacji w zakresie ochrony mieszkańców.

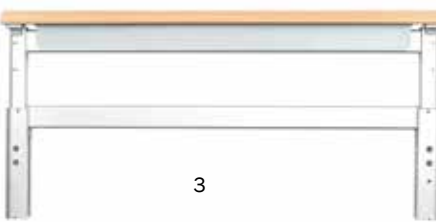

Dowiedz się więcej:




Skuteczne zapobieganie odleżynom

Powierzchnia leżenia – ergonomia i modułowość.


Ergonomiczny podział powierzchni leżącej pomaga uniknąć obciążeń uciskowych, a tym samym zmniejszyć odleżyny. Wymiary 4-sekcyjnej powierzchni leży z łóżek pielęgnacyjnych wissner-bosserhoff są oparte na średniej wysokości osoby oraz na podstawie wiedzy.

Prof. Eigler pokazuje, że obszar oparcia powinien mieć co najmniej 80 cm długości, aby zapewnić skuteczne podparcie kręgosłupa szyjnego. Leżąca powierzchnia BiNetic osiąga dodatkową redukcję obciążeń dociskowych dla większych niż przeciętni mieszkańcy dzięki swojej zintegro-

wanej powierzchni. Przedłużenie łóżka: dzięki beznarzędziowej obsłudze ekspresowo możemy przedłużyć powierzchnię leża do 210cm lub 220cm i w ten sposób zapobiec wypadaniu nóg poza łóżko.

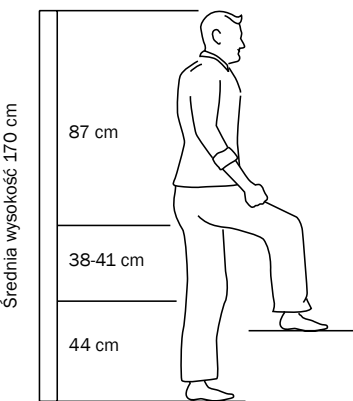

Antropometria według Prof. Eigler*

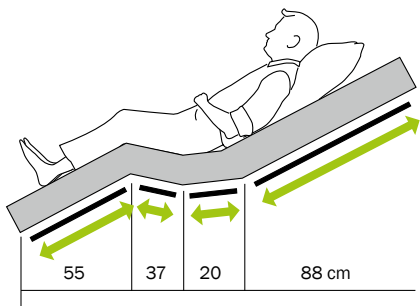

BiNetic - powierzchnia leżąca 200 cm (długie oparcie)

Aż do

2.7

milionów ludzi

cierpi w Niemczech na przewlekłe rany, takie jak odleżyny. Nie tylko ze względu na zmiany demograficzne, szczególnie osoby starsze cierpią na przewlekłe rany. Ryzyko wynosi ponad 11% dla osób powyżej 90 roku życia. Odleżyna stanowi poważne obciążenie dla mieszkańca.

Terapia zwykle trwa kilka tygodni lub miesięcy i często może powodować dodatkowy dyskomfort

Źródło: BVMed 2012 study

Działanie podwójnego cofnięcia leża**


BiNetic charakteryzuje się podwójnym cofnięciem leża. Przesuwane jest nie tylko oparcie, ale także podnózek z dala od części siedziska, dzięki czemu zwiększa się powierzchnia siedziska. Wyniki pomiarów nacisku wyraźnie pokazują, że obciążenie

ciśnieniowe na podwójnie cofniętym leżu jest niższe niż przy pojedynczym cofnięciu i znacznie mniejsze niż przy standardowej powierzchni do leżenia. Podwójne cofnięcie leża nie powinno służyć jednak jako tylko jedyne zabezpieczenie zapobiegające odleżynom.


Modułowa podstawa materaca

- Do wyboru masz 3 różne leżące obszary:
- 01 Siatkowa powierzchnia leżąca Aero zapewnia dobrą wentylację.
 - 02 Plastikowe podkładki na podstawie materaca EasyClean są szczególnie łatwe do czyszczenia.
 - 03 Komfortowa powierzchnia do leżenia z 55 elementami sprężystymi nie tylko poprawia komfort leżenia, ale także stanowi cenny wkład w zapobieganie odleżynom.

Elementy leża łatwe do czyszczenia oraz demontażu

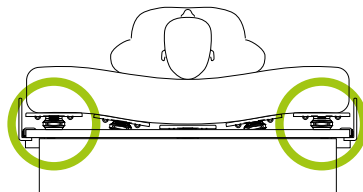

Komfort dzięki 55 elementom sprężystym

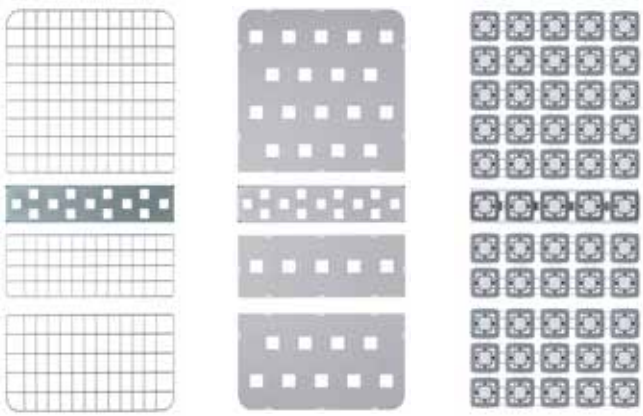

01


02

03




Szczególnie wygodne łóżko

WIBO powierzchnia leżenia z wyraźnym odgięciem

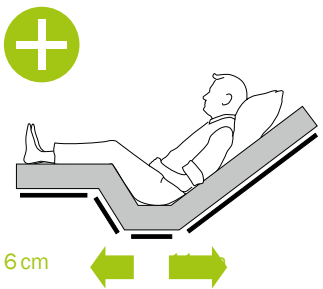


podwójne cofnięcie = zapobieganie odleżynom

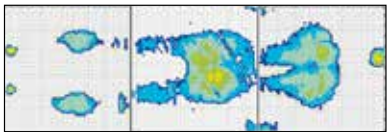


Termografia BiNetic-powierzchnia leżenia

Standard – bez odgięcia

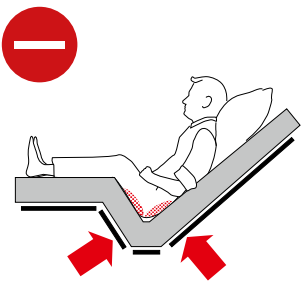

zwykłe cofnięcie = ryzyko odleżyn

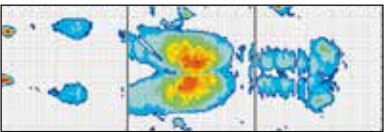


Termografia w standardowej powierzchni leżenia

Podwójne cofnięcie =

17cm

dodatkowej przestrzeni

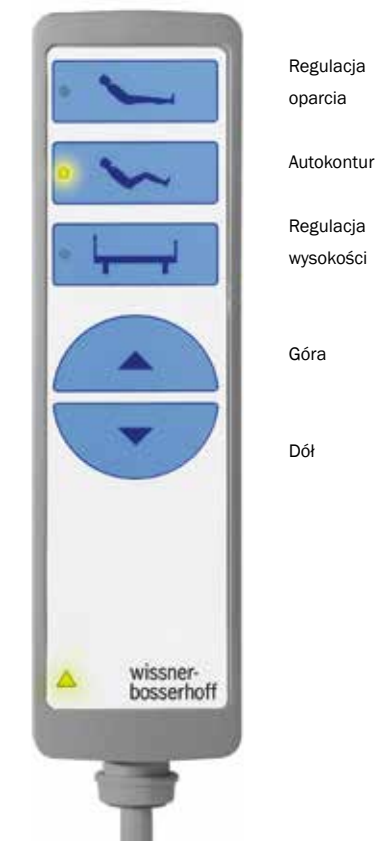

Prosta obsługa łóżka i bezpieczna mobilizacja

SafeLift | Zalety produktu w skrócie

NOWE!

SafeLift oferuje najprostszą obsługę, dzięki czemu mieszkańcy mogą samodzielnie regulować wysokość swojego łóżka i ustawić je w najlepszej dla nich pozycji mobilizacyjnej. Rozwiązanie to wspomaga mieszkańca w samodzielnej mobilizacji oraz zmniejsza ilość wezwań personelu w celu pomocy.

- Kontroler bez kabli i baterii
- Przyciski regulacji wysokości łóżka i oparcia
- Duże przyciski
- Łatwo dostępna pozycja na jednej z osłon bocznych SafeFree®-Flex
- Przycisk GO (ochrona przed niezamierzoną regulacją łóżka)
- Obrotowość 360°
- Ergonomiczna konstrukcja
- Wysoka stabilność

Dowiedz się
więcej:



Intuicyjna obsługa

Przejrzystszy i bardziej ekonomiczny

Panel ręczny łóżek pielęgnacyjnych movita | movita casa na pierwszy rzut oka robi wrażenie swoją przejrzystością i ergonomiczną konstrukcją: mniej przycisków i duże symbole zapewniają intuicyjną obsługę. Dzięki funkcji preselekcji przełącznik ręczny jest bezpieczny w razie awarii – funkcja wyzwalana przez przypadkowe naciśnięcie przycisku jest niemożliwa.

Zaawansowane funkcje

- Lampka nocna i lampka do czytania
- Oddzielna regulacja zanożka
- Funkcja mobilizacji



www.wi-bo.com/de/ueber-uns/Anleitungsvideos

Klucz bez magnesu -
do zmieniania poziomów
bezpieczeństwa



3 poziomy bezpieczeństwa



Funkcja blokowania z tyłu jest zintegrowana z pilotem, więc nie ma potrzeby szukania i pochylania się w celu zablokowania skrzynki przymocowanej do powierzchni łóżka. Trzy tryby przełączania ręcznego ustawia się za pomocą przycisku bez magnesu:

Tryb opieki:

Wszystkie przyciski wyboru są odblokowane.

Tryb blokady:

Wszystkie przyciski wyboru są zablokowane.

Tryb pacjenta:

Pacjent może korzystać z niebieskich przycisków.

Zestaw mobilizacyjny

MobiStick 2

MobiStick 2 wspomaga mieszkańców podczas mobilizacji, mieszkaniac w wielu przypadkach nie musi prosić personelu pielęgnarskiego o pomoc podczas podnoszenia się z łóżka. Ergonomiczny kształt MobiStick 2 sprawia, że jest łatwy i intuicyjny w użyciu w dowolnym miejscu.



Dzięki ergonomicznemu kształtowi MobiStick2 jest łatwy i intuicyjny w użyciu oraz ma uniwersalne zastosowanie. Pokrętko ręczne jest obrotowe i ma prostą blokadę.



Gdy nie jest używany, można go po prostu złożyć, dzięki czemu nie przeszkadza, ale jest szybko gotowy do użycia w razie potrzeby.

NOWE!



Beznarzędziowy

MobiStick 2 można przymocować bez użycia narzędzi po obu stronach łóżka, jest odpowiedni dla każdego rozmiaru mieszkańca i można go doposażyć w łóżka wissner-bosserhoff produkowane od 2004 roku.

Dowiedz się więcej:



Bezpieczeństwo w dzień i w nocy

SafeSense® – inteligentny system czujników wyjścia z łóżka

wissner-bosserhoff – Twój niezawodny partner w unikaniu FDM: Dzięki SafeSense®, wissner-bosserhoff przedstawia system pomocy z inteligentnymi czujnikami, który niezawodnie wspiera opiekunów w dzień i w nocy w zmniejszaniu FDM*. System jest wyposażony w automatyczne światło nocne, które włącza się, gdy pacjent wychodzi z łóżka i gaśnie, gdy mieszkaniac wróci do łóżka. SafeSense® jest kompatybilny ze standardowymi systemami przywołania pielęgniarki i może być modernizowany z systemem łóżek opieki wissner-bosserhoff produkowanymi od 2002 roku.



Automatyczne światło nocne

- Lampka nocna włącza się automatycznie po wstaniu z łóżka
- Lampka nocna gaśnie, gdy mieszkaniac wraca do łóżka

Indywidualny alarm

- Elastyczny i płynnie regulowany alarm uruchamiany natychmiastowo po wstaniu z łóżka lub do 30min od wstania z łóżka
- Dostosowujący się do mobilności mieszkańca

Zintegrowany lub zmodernizowany zestaw*

- Opcja akcesoriów do obecnych łóżek pielęgnacyjnych Wi-Bo
- Zestaw do modernizacji elektrycznych łóżek pielęgnacyjnych Wi-Bo od 2002r.
- Dostępne jako rozwiązanie radiowe lub kablowe

Dowiedz się więcej:



Większe bezpieczeństwo – mniej środków pozbawiających wolność(FDM)

- Krótszy czas reakcji w przypadku upadku
- Większy poziom bezpieczeństwa na nocnych i weekendowych zmianach
- Idealny w połączeniu z osłonami bocznymi SafeFree®

Elastyczność i oszczędność czasu

Beznarzędziowa regulacja długości łóżka

- Wszystkie łóżka pielęgnacyjne firmy wissner-bosserhoff mają standardowo zintegrowane przedłużenie łóżka.
- Ekspresowe przedłużenie łóżka (patrz rysunek poniżej) umożliwia elastyczne dopasowanie łóżek Movita z dzielonymi osłonami bocznymi do różnych długości łóżka bez użycia narzędzi.
- Specyfikacje normy IEC 60601-2-52 są przestrzegane w każdej konfiguracji.




Dowiedz się więcej:




200 cm

Długość łóżka 200 cm:
Podzielone osłony boczne zapewniają ochronę bez dużej centralnej szczeliny* i bez osłony

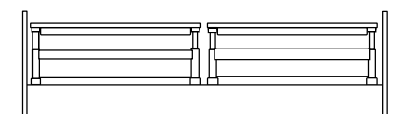


210 cm

Alternatywne łóżko o długości 210 cm: ochrona z dłuższymi osłonami bocznymi po stronie stopy bez akcesoriów i bez szczeliny > 318 mm**

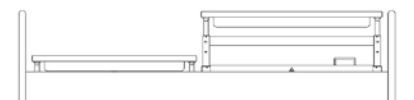

220 cm

Przedłużenie łóżka do 220 cm: może być tymczasowo regulowany w łóżkach movita za pomocą dzielonych osłon bocznych – pełną ochronę zapewnia zanóżek (wyposażenie dodatkowe)

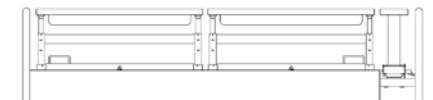

Efektywność energetyczna i odporność

Dzięki innowacyjnej koncepcji napędu

Mocny silnik sprawia, że łóżka movita są jeszcze bardziej przyjazne dla użytkownika, sprężyste i energooszczędne. Zintegrowana technologia LED, energooszczędny sprzęt i przyjazna w obsłudze konstrukcja stanowi ekonomiczne wymagania eksploatacji domu opieki.



Bardziej przyjazny dla użytkownika

Łóżka movita zawierają zintegrowane z silnikiem połączenie oświetlenia łóżka w technologii LED. Wszystko czego potrzebujesz to podłączony kabel zasilania od łóżka do gniazda z prądem.



Ekonomiczny i energooszczędny

Ze względu na stale rosnące ceny energii elektrycznej, efektywność energetyczna staje się coraz ważniejszym czynnikiem. Przy wyjątkowo niskim zużyciu energii w trybie czuwania wynoszącym zaledwie 0,9 W silnik jest wyjątkowo ekonomiczny.



Komfortowa lampka do czytania LED lymera

Energooszczędne światła

Pofalowany kształt klosza, z jego częściowo półprzezroczystym charakterem, jest charakterystycznym elementem wystroju tych lamp. Wyposażona w obrotowe ramię lampka umożliwia precyzyjne ustawienie ogniska światła blisko oświetlanego obiektu.



Designerska lampka LED soluna z falującym kloszem

Zalety LED

- Długa żywotność
- Niskie zużycie energii
- Brak nagrzewania się
- Całkowicie bezpieczna obsługa



Design | Zagłówek-/zanózek

zagłówek



Design A */**
Zagłówek/zanózek



Design D



Design Df */**



Design G



Design K **



Design O */**



Design T



Design Ts */**

zanózek



Design Ak */**
Zagłówek/zanózek



Design D



Design Df */**



Design G



Design K **



Design O */**



Design T



Design Ts */**

Sekcja niska



Design Ak */**
złożone



Design D (Dx)



Design DF (Dfx) */**



Design G (Gx)



Design K (Kx) **



Design O (Ox) */**



Design T (Tx)



Design Ts (Tsx) */**

Kolory | dekory*



Biały wulkaniczny (U11502)



Brzoza Lund (R35018)



Dąb Lindber (R20021)



Sosna Suomi Szara (R55022)



Buk naturalny (R24015)



Buk (R24034)



Wiśnia (R42002)



Wiśnia Havana (R42006)



Sosna wiejska (R55023)



Akacja ciemna (R38006)




Koncepcja koloru dla pokoju z serii memoriana


Koncepcja kolorów dla pokoju z serii memoriana**



Brzoza Lund (R35018)
Dąb Lindberg (R20021)

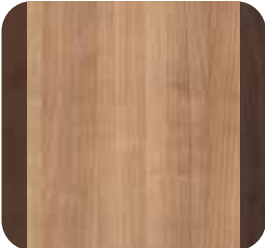


Wiśnia Havana (R42006)
Kakao (R5447)

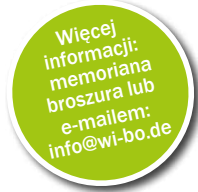


Sprzęt i akcesoria

Wymiary

10-0625 movita AS (Szpilki / rolki) L 208 cm, B 103/106 cm 21/5000 bez regulacji wysokości	10-0740 movita 2-s L 208 cm, W 93/95 cm H1 36-38 / H2 78-80 cm	10-0766 movita 2-d (tylko ochrona boczna 09) L 208 cm, W 103/108 cm H1 36-38 / H2 78-80 cm	10-0540 movita L 208 cm, W 103/108 cm H1 36-38 / H2 78-80 cm	10-0574 movita casa L 208 cm, W 103/106 cm H1 38 / H2 80 cm
---	--	--	--	---

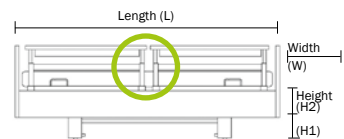

Dzielone osłony boczne (seria 10), bez szczelin

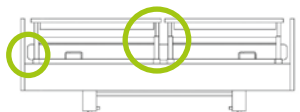

Dzielone osłony boczne (seria 11), bez szczelin




Zabezpieczenie boczne ciągłe 2-krotne 09 z wyzwaniem pistoletowym




Ciągłe 3-krotne zabezpieczenie boczne 09


Typy leża

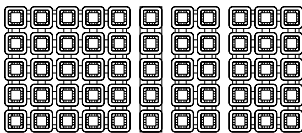

Comfort

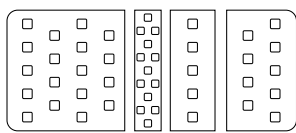


EasyClean

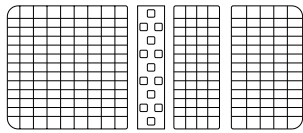


Standard | Aero


Przedłużenie łóżka

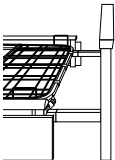


Przedłużenie łóżka w pozycji pionowej 10er zabezpieczenie boczne (standard)

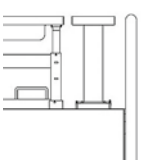


Stałe przedłużenie łóżka 10 er bocznych (opcja) (Opcja)

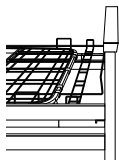

Stałe przedłużenie łóżka 09 ochrona boczna (Opcja)

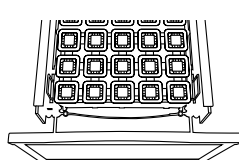


Przedłużenie łóżka z ekspresowym zwolnieniem (opcja)

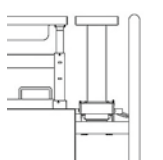

10-0570 / 10-0580
Ochraniacz na przedłużenie łóżka o 20 cm (opcja)


Opcje

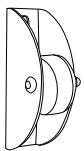


Rolki odchylające nie dla movita AS)



3D-Pionowe ochraniacze ścian (nie dla movita AS)

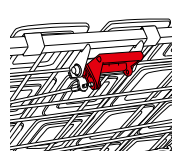

Ręczne opuszczanie awaryjne na oparciu

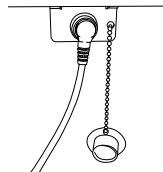


Plug + Play, aby użyć sterowania ręcznego po jednej lub obu stronach łóżka




01-010812, 01-010813
Lampa podłogowa przełączana (nie pokazano)


Akcesoria

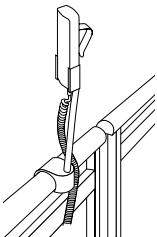


10-0419
Uchwyt na pilota do podzielonych osłon bocznych
10-0421
Uchwyt na pilota, krótki

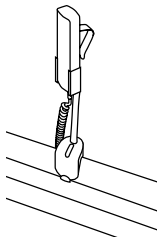


10-0422
Akcesoria i uchwyt na pilota do ciągłych osłon bocznych
10-0421
Uchwyt na pilota, krótki

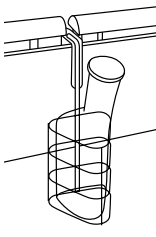


10-0424
Uchwyt na akcesoria i przełącznik ręczny do przymocowania do boku łóżka
50-0164 Uchwyt na worek na mocz (nie pokazano)

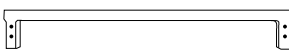


10-0817
Podstawa z zamknięciem luki

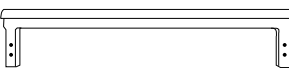


10-0818
Podstawa drewniana z zamknięciem luki

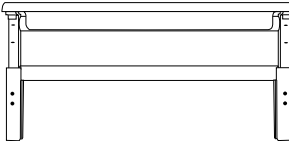


10-0819
Element boczny Flex

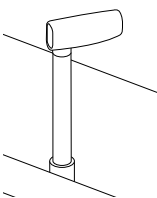


10-0634
Zestaw mobilizacyjny MobiStick 2

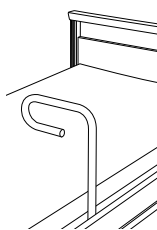

10-0715
Pomoc przy wstawianiu do osłon bocznych 09 a także do 3/4 osłon bocznych

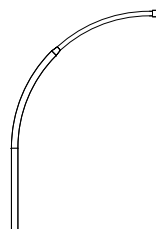


50-0773 Designerska lampa LED soluna z zasilaczem
50-0550 Designerska oprawa oświetleniowa LED bez zasilacza

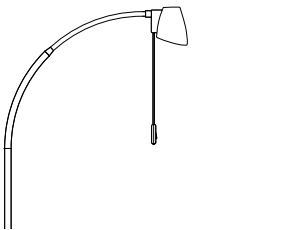


50-0677 Komfortowa lampka do czytania LED lymera (z zasilaniem i bez).




50-0206
Mata przeciwupadkowa szer. 90 x dł. 200 cm, wysokość ok. 4,5 cm

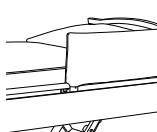


50-0174

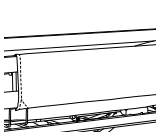


50-0338

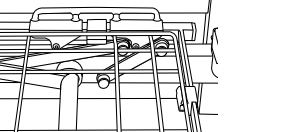


10-0563/10-0533/10-0521
Uchwyt Segufix
- na podparcie ud
- na oparcie
- do siedziska

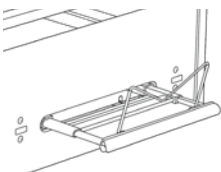


10-0617
Zintegrowany designerski uchwyt na białiznę Kompatybilny ze wszystkimi łóżkami (z wyjątkiem 09, 3-częściowych osłon bocznych i konstrukcja A-kk)

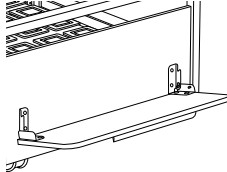


10-0719
Uchwyt na białiznę,

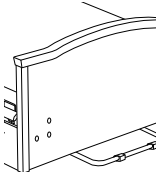

10-0548

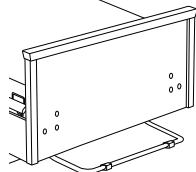


10-0587

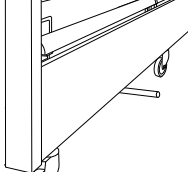


10-0549
panel boczny uchwyt dystansowy movita/movita casa

Akcesoria | SafeSense® & SafeLift

SafeSense® sensor mat 2.1

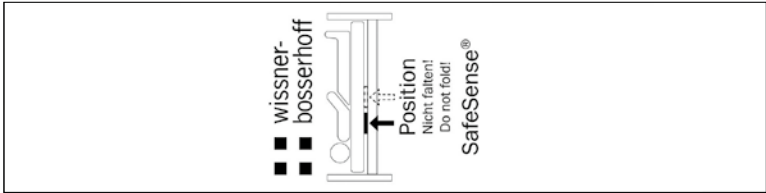

02-000876
SafeSense® sensor mat 2.1
80 x 20 cm

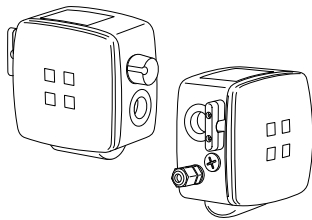


10-0812
Cyfrowa skrzynka wyjściowa
2.1 wersja przewodowa lub
bezprzewodowa

Dostępne także
jako zestaw:

Sensor mat 2.1 &
box - wyjście z łóżka 2
10-0871
Wersja kablowa
10-0872
Wersja bezprzewodowa

SafeSense® zestaw łączności

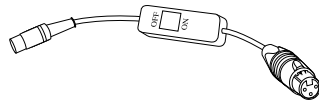

04-1508
Kabel adaptera z włącznikiem / wyłącznikiem i
odpowiednia wtyczka do podłączenia do
system wezwania pielęgniarzy (dostosowany do klienta)
dla wersji kablowej i bezprzewodowej




04-1608
Kabel adaptera bez włącznika / wyłącznika;
z odpowiednią wtyczką do podłączenia do
system wezwania pielęgniarzy (dostosowany
do klienta) dla wersji kablowej i bezprze-
wodowej

SafeLift obsługa łóżka



10-0811
SafeLift kontroler

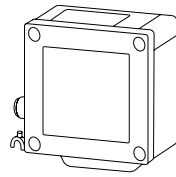


10-0808
SafeLiftBox


W zestawie:

10-0799
SafeLift set

Płyta mocująca SafeSense® i SafeLift

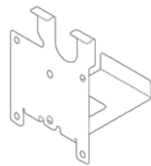

01-011193
Płyta mocująca do silnika
DU09

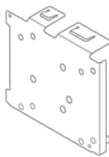

01-011194
Płyta mocująca do silnika Q7

Certyfikaty

wissner-bosserhoff dobrowolnie zleca regularne kontrole procesów produkcyjnych i zarządzania przez TÜV Süd.
Firma jest certyfikowana zgodnie z regulacjami normy DIN EN ISO 9001 dla systemów zarządzania jakością,
DIN EN ISO 13485 w zakresie produkcji wyrobów medycznych oraz ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskowego.



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016



ISO 14001:2015



Certyfikat
bocznych
osłon



Stoliki nocne i inne akcesoria

możesz znaleźć w dodatkowych katalogach



Members of LINET Group



wissner-bosserhoff | Germany | wi-bo.com

Wyłączny dystrybutor w Polsce
Destini Group Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Obornicka 52 | 62-002 Złotniki | Polska
Tel.: +48 790 665 445
biuro@destinicare.pl | destinicare.pl
NIP 9721258845

**DESTINI
CARE** 